

SHIN-EI

コンパクト、軽量、耐久性、使いやすさ…


COMFORT OASIS オアシス KU-200
ULTRASONIC NEBULIZER

NewType



新鋭工業株式会社

使いやすさをコンセプトにシンプルな構造になりました。

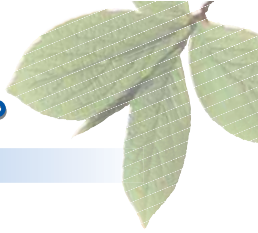

特長

●自己診断機能

万一の作動不良の場合にも原因箇所の発見が容易です。


●シンプルな構造

故障箇所が少なく、清潔が保たれメンテナンスが容易です。

●電装部分の防水対策

作用水の誤注入、移動時電装部分の水の進入を防ぎます。

操作パネルの説明

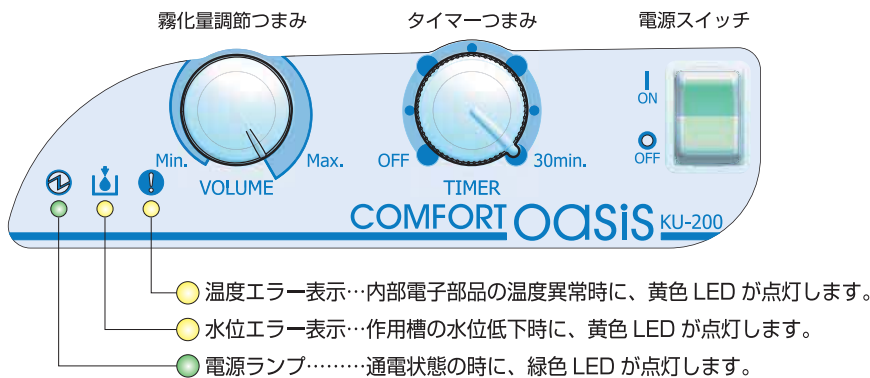


*エラー表示が点灯すると振動子の動作は停止しますが、電源ランプは点灯したまま送風ファンは動作しております。
*エラー表示の対処方法については、19 ページを参照してください。



架台

標準セット&オプション

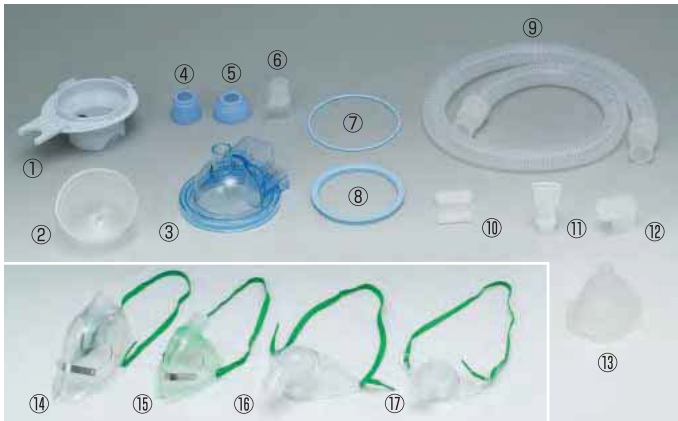

【標準セット】

- ① カップホルダー
- ② 薬液カップ
- ③ 霧化室
- ④ 小量霧化キャップ(小)
- ⑤ 小量霧化キャップ(大)

【オプション】

- ⑥ 酸素導入プラグ
- ⑦ 作用水槽パッキン
- ⑧ 霧化室パッキン
- ⑨ 耐熱蛇管 100cm
- ⑩ エアフィルター
- ⑪ マウスピース
- ⑫ L型アダプター
- ⑬ マスク(小)
- ⑭ ネブライザーマスク(大)
- ⑮ ネブライザーマスク(小)
- ⑯ トラキマスク(大)
- ⑰ トラキマスク(小)

製品仕様

電源	交流 100V 50・60Hz
消費電力	51V/45VA(50Hz/60Hz)
動作モード	間欠動作 (30分 ON/30分 OFF)
ヒューズ定格	250V 0.75A (タイムラグ型)
超音波発振周波数	約 1.7MHz
最大噴霧量	約 3.5mL/分*1
噴霧粒子径	1・5μm*1
最大送風量	18L/分
薬液カップ容量	最大 100mL
作用水容量	約 200mL
本体質量	約 2.5kg (本体のみ)
外形寸法	幅約 260× 奥行約 145× 高さ約 170mm (突起物除く)
安全装置	サーモスタット、水位センサー、ファンカバー
付属品	少量霧化キャップセット (パイプ、カップ (大)、カップ (小))、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、電源コード、2P 変換プラグ、ヒューズ (予備、2本)、取扱説明書 (本書)、添付文書、保証書、ユーザー登録カード



安全と省力化で医療福祉社会を願う

新鋭工業株式会社

営業所	〒362-0055	埼玉県上尾市平方領家308-2	TEL.048(725)1786 FAX.048(725)7550
本社	〒113-0033	東京都文京区本郷3-12-5	TEL.03(3816)0444 FAX.03(3816)0406
大阪支店	〒541-0042	大阪府大阪市中央区今橋1-6-1	TEL.06(6228)3311 FAX.06(6228)3321
札幌支店	〒060-0907	北海道札幌市東区北七条東4丁目	TEL.011(741)7752 FAX.011(753)2703
仙台支店	〒984-0012	宮城県仙台市若林区六丁の目町10-3	TEL.022(288)4660 FAX.022(288)4661
新潟支店	〒951-8136	新潟県新潟市中央区関屋町1-1	TEL.025(233)0592 FAX.025(233)0573
山陰支店	〒683-0001	鳥取県米子市皆生温泉2-20-27	TEL.0859(34)5675 FAX.0859(34)5708
岡山支店	〒700-0982	岡山県岡山市中島町1-7-8	TEL.086(235)0323 FAX.086(235)0324
広島支店	〒733-0822	広島県広島市西区庚午中3-2-38	TEL.082(275)0740 FAX.082(275)0760
(株)新鋭工業福岡			
本社	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	TEL.092(622)0055 FAX.092(622)0052
沖縄支店	〒901-2103	沖縄県浦添市仲間1-19-6	TEL.098(876)4262 FAX.098(876)6097
新鋭工業販売(株)			
本社	〒461-0025	愛知県名古屋市中区徳川112-16-42	TEL.052(939)0700 FAX.052(939)0717
金沢営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1-4-11	TEL.0762(24)5777 FAX.0762(24)5750
長野営業所	〒399-0701	長野県塩尻市広丘吉田1149-3	TEL.0263(86)5779 FAX.0263(86)7092
静岡営業所	〒424-0012	静岡県静岡市清水区下野西1-6	TEL.0543(64)7670 FAX.0543(64)0273

ホームページアドレス <http://www.shinei.org>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。